




Tasten und Steuerelemente

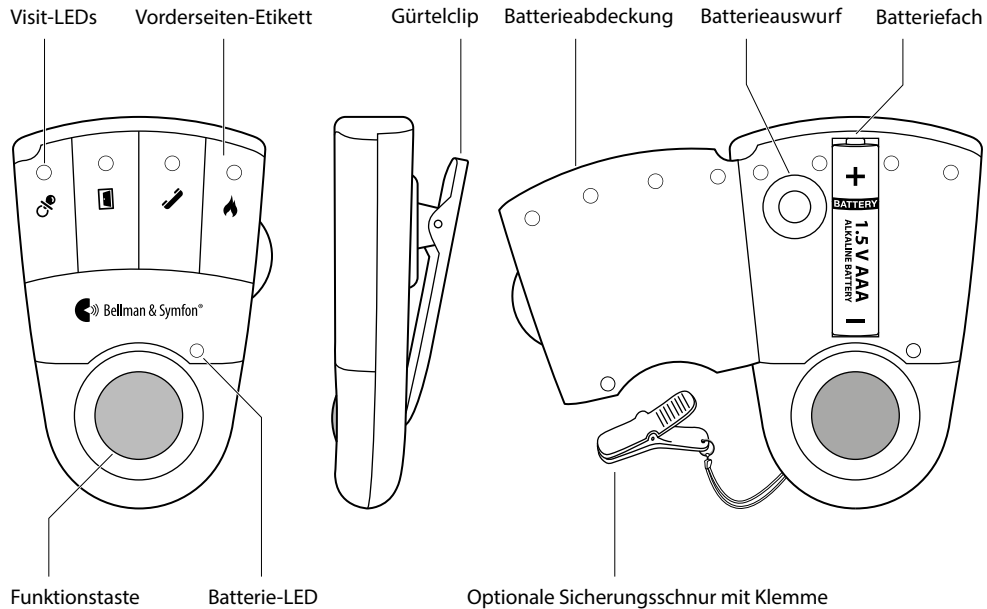


Einführung

Dieses Pager-Empfangsgerät ist Teil des Visit-Smart-Home-Systems, mit dem Sie jederzeit Kontrolle über ihr Zuhause haben. Es benachrichtigt Sie mit einem sanften Vibrationsalarm, wenn es an der Tür läutet oder das Telefon klingelt, wenn Ihr Baby nach Ihnen verlangt oder ein Feuer ausbrechen sollte. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie den Pager verwenden.

Erste Schritte

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach, legen Sie die Batterie ein und schließen Sie das Fach wieder. Befestigen Sie den Pager mit dem Gürtelclip an Ihrem Gürtel. Für zusätzliche Sicherung gegen Verlust können Sie die beiliegende Sicherungsschnur verwenden.
- 2 Um die Funkverbindung überprüfen zu können, benötigen Sie einen Visit-Sender. Drücken Sie Prüftaste/n des Senders.
- 3 Der Pager beginnt zu vibrieren und die Visit-LED leuchtet auf. Wenn während des Ladens ein Bettalarm angeschlossen ist, vibriert dieser Alarm. Wenn nichts passiert, siehe **Fehlersuche**.

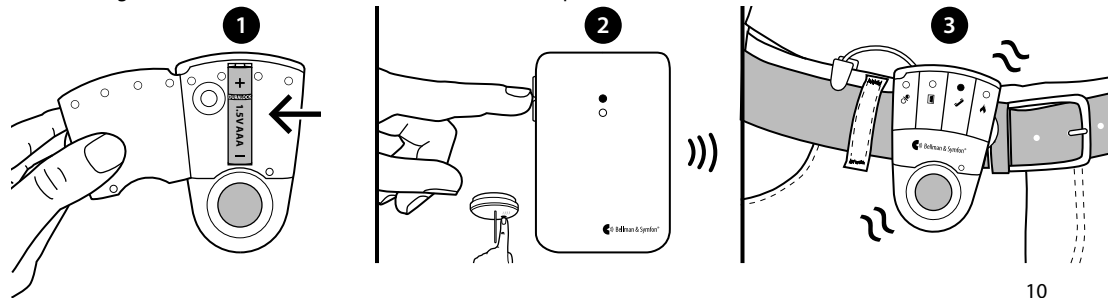

Standardmäßiges Signalmuster

Wenn ein Sender aktiviert wird, leuchtet die Visit-LED am Pager auf und der Pager beginnt, mit einer bestimmten Geschwindigkeit zu vibrieren. Dies wird Signalmuster genannt. Der Sender gibt das Signalmuster vor, diese ist standardmäßig wie folgt eingestellt:

Aktivierter Sender	Farbe der Pager-LED	Vibration, BE1470	Vibration, BE1230
▪ Türsender	Grün	Langsam ■□□□	Langsam ■□□□
▪ Taste am Sender	Grün	Langsam ■□□□	Langsam ■□□□
▪ Telefonsender	Gelb	Mittel ■□■□	Langsam ■□□□
▪ Babyphone	Orange	Schnell ■■■■■■	Schnell ■■■■■■
▪ Rauchmelder	Rot	Lang ■■■■□	Lang ■■■■□

Das Signalmuster kann nur an den Sendern geändert werden, siehe separate Bedienungsanleitungen.

Batterie ersetzen

Wenn die Batterie-LED beginnt, gelb zu blinken, ist die Batterie fast leer. So ersetzen Sie die Batterie:

- Öffnen Sie das Batteriefach und drücken Sie die Auswurf-taste, um die Batterie zu entfernen. Legen Sie eine neue Alkaline-Batterie (1,5-V; Typ AAA) ein. Siehe Batteriefach für korrekte Positionierung.

Vorderseiten-Etikett wechseln

Wenn Sie Visit für andere Zwecke verwenden möchten, können Sie das Vorderseiten-Etikett austauschen. So wechseln Sie das Etikett:

- Öffnen Sie das Batteriefach, ersetzen Sie das originale durch das neue Etikett und schließen Sie das Fach wieder.


Funkfrequenz ändern

Wenn Ihr Nachbar ebenfalls über ein Visit-System verfügt, können Sie die Funkfrequenz ändern, um sicherzustellen, dass die Systeme sich nicht gegenseitig stören. Siehe **Funkfrequenz ändern** in der Installationsanleitung.

Zubehör

Der Pager kann mit dem folgenden Zubehör ergänzt werden:

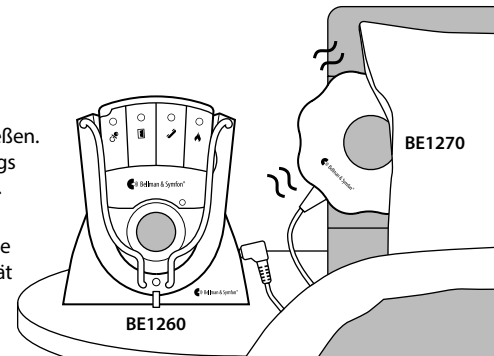

- **BE1260 Pager-Ladegerät**
Lädt Ihren Pager über Nacht auf. Sie können es auf dem Nachttisch platzieren und maximal zwei Bettalarne anschließen. Bitte beachten Sie, dass der Pager während des Ladevorgangs nicht vibriert, die Visit-LED funktioniert jedoch wie gewohnt.
- **BE1270 Bettalarm**
Weckt Sie durch Vibrationen, falls etwas passiert, während Sie schlafen. Schließen Sie den Bettalarm an das Pager-Ladegerät an und schieben Sie ihn unter das Kopfkissen oder unter die Matratze Ihres Betts.



Warnung! Bei Verwendung des Pager-Ladegeräts dürfen Sie **AUSSCHLIESSLICH NACHLADBARE NiMH-BATTERIEN** im Pager verwenden. Nicht-nachladbare Batterien laufen aus, wenn der Pager in das Ladegerät eingelegt wird und die auslaufende Batteriesäure beschädigt die Elektronik. Daraus resultierende Schäden sind von der Garantie ausgeschlossen.

Fehlersuche

Die meisten Probleme lassen sich mit den nachstehenden Ratschlägen schnell beheben.

Wenn	Lösung
Der Pager scheint ausgeschaltet zu sein.	<ul style="list-style-type: none">Die Batterie ist leer. Ersetzen Sie sie mit einer Alkaline-Batterie (1,5 V; AAA).  Wichtig! Wenn Sie über ein Pager-Ladegerät verfügen, dürfen Sie ausschließlich nachladbare NiMH-Batterien (1,2 V; AAA) für den Pager verwenden.
Die Batterie-LED blinkt gelb.	<ul style="list-style-type: none">Der Batterieladestand ist niedrig. Ersetzen Sie sie mit einer Alkaline-Batterie (1,5 V; AAA).  Wichtig! Wenn Sie über ein Pager-Ladegerät verfügen, dürfen Sie ausschließlich nachladbare NiMH-Batterien (1,2 V; AAA) für den Pager verwenden.
Der Pager reagiert nicht, wenn ein Sender aktiviert wird.	<ul style="list-style-type: none">Überprüfen Sie die Batterien der Sender.Verringern Sie den Abstand zwischen Pager und Sendern, um sicherzustellen, dass sie in Reichweite sind.Überprüfen Sie, ob der Pager auf dieselbe Funkfrequenz eingestellt ist wie die anderen Geräte im Visit-System, siehe Funkfrequenz ändern in der Installationsanleitung.
Der Pager wird ohne ersichtlichen Grund aktiviert.	<ul style="list-style-type: none">Vermutlich ist in der Nähe ein anderes Visit-System installiert, das ihr System aktiviert. Ändern Sie bei allen Geräten die Funkfrequenz (siehe Funkfrequenz ändern in der Installationsanleitung).

Technische Informationen

Abmessungen	H 86 mm x B 57 mm x T 29 mm
Gewicht	70 g inkl. Batterie
Strom	Netzstrom: 7,5 V DC 200 mA mit BE1260 Ladegerät-Zubehör Batteriestrom: 1 x Alkaline (1,5 V; AAA) oder 1 x nachladbare NiMH-Batterie (1,2 V; AAA)
Stromverbrauch	Aktiv: 220 mA, Ruhezustand: 1 mA
Betriebsdauer	Mit Alkaline-Batterie: 2-3 Wochen, Mit NiMH-Batterie: ca.1 Woche, (wenn vollständig geladen)
Aktivierung	Über einen Visit-Sender.
Funkfrequenz	314,91 MHz, 433,92 MHz und 868,30 MHz, abhängig von der Region.
Reichweite	50 - 250 m, abhängig von Funkfrequenz und Gebäudestruktur bzw. -eigenschaften
Im Feld	BE1470 Pager, Gürtelclip, Sicherungsschnur und zweites Vorderseiten-Etikett
Zubehör	BE1260 Pager-Ladegerät, BE1270 Bettalarm
Umgebung	Nur für den Innengebrauch.
Vorschriften	Erfüllt CE, FCC, RoHS, A-Tick, WEEE, Der Grüne Punkt

Zusätzliche Informationen

Verwendung,Transport und Lagerung	Informationen finden Sie im Installer's Guide .
Wartung und Reinigung	Wartungsfrei. Reinigung mit einem nur leicht feuchten Tuch. Nicht für den Wiedereinsatz durch andere Personen vorgesehen.
Sicherheit und Vorschriften	Informationen finden Sie im Installer's Guide .
Service und Support	Informationen finden Sie im Installer's Guide .

Installer's guide

Visit pager receiver in depth information



101 Buttons and controls

102 Getting started

103 Using the pager and the accessories

105 Changing the radio key

106 Advanced programming

107 Resetting the pager

107 Testing the connection

108 Troubleshooting

109 Technical information

110 Care and cleaning


111 Important safety instructions

Changing the radio key

If a neighbor also has a Visit system, you can change the radio key so that your systems don't interfere. The radio key is changed on the **transmitters** and must be set to the same position on all units in the system.

Here is how you change the radio key

- 1 Open the transmitter cover and move any radio key switch/es to the up=on position to change the radio key. See the transmitter user manual for further information.
- 2 Press and hold the function button on the pager until the green and yellow LEDs blink alternately. Release the button.
- 3 Press the test button/s on the transmitter within 30 seconds to send the new radio key.
- 4 All Visit LEDs blink 5 times to show that the radio key has been changed. It then returns to normal mode.

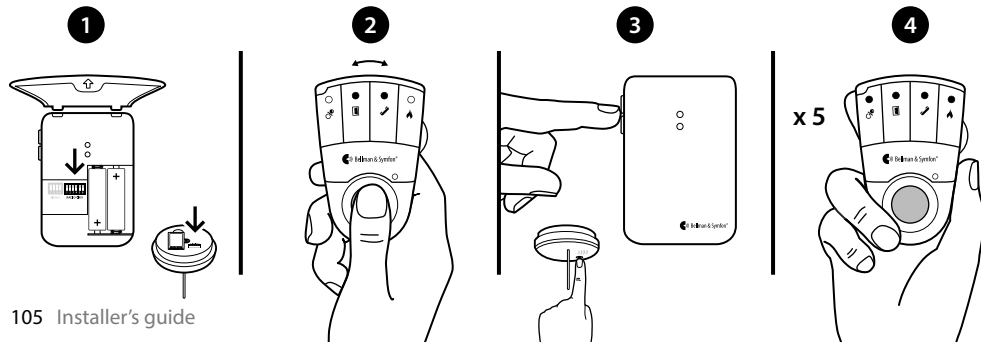

Advanced programming

By using advanced programming, you can customize the signal pattern from a specific transmitter and event, displaying the LED colour and vibration pattern of your choice. The advanced programming overrides the radio key and pairs the units via the serial number. Please note that smoke alarms cannot be programmed for safety reasons.

Note: The transmitter must be activated as it is intended to be used in the system to generate the right signal. This means that you can't always use the transmitter test button, see **Default signal pattern** for the relevant transmitter.

Here is how you program the pager:

- 1 Press and hold the function button on the pager. The green and yellow Visit LEDs will start to blink alternately. While still holding down the button, activate the desired transmitter as intended. The yellow battery LED on the pager will light up to indicate that you are in advanced programming mode. Release the button.
- 2 Scroll through the different **Visit LED options** by pressing the function button on the pager. Select the desired Visit LED pattern by holding down the function button until the battery LED goes out and lights up again.
- 3 Scroll through the different **vibration options** by pressing the function button on the pager. Select the desired vibration pattern by holding down the function button until the battery LED goes out and lights up again.
- 4 The pager will now show the new Visit LED colour and vibration pattern. Press the function button briefly to end the demonstration. After a short while, the pager will return to normal mode.



Deleting the advanced programming

Follow the procedure below to delete the advanced programming:

- 1 Hold down the function button on the pager until the green and yellow Visit LEDs blink alternately. Release the button.
- 2 Press the function button on the pager 3 times in quick succession.
- 3 All Visit LEDs will light up for ~2 seconds to show that it has been deleted.

Troubleshooting

Most problems with the pager can be solved quickly by following the advice below.

If	Try this
The pager seems to be turned off	<ul style="list-style-type: none">▪ The battery is depleted. Replace it with a 1.5V AAA alkaline battery.  Important! If you have a pager charger, only use a rechargeable 1.2 V AAA NiMh battery in the pager.
The battery LED blinks in yellow	<ul style="list-style-type: none">▪ The battery level is low. Replace it with a 1.5V AAA alkaline battery.  Important! If you have a pager charger, only use a rechargeable 1.2 V AAA NiMh battery in the pager.
The pager does not respond when a transmitter is activated	<ul style="list-style-type: none">▪ Check the batteries in the transmitters.▪ Move the pager closer to the transmitter to make sure it's within radio range.▪ Check that the pager is set to the same radio key as the other units in the Visit system, see Changing the radio key.
The pager is activated for no apparent reason	<ul style="list-style-type: none">▪ There is probably another Visit system installed nearby that triggers your system. Change the radio key on all units, see Changing the radio key.

Technical information

Dimensions and weight	H 86mm (3.4") x W 57mm (2.2") x D 29mm (1.1"). Weight: 70 g (2.5 oz.) incl. battery
Power supply	Mains power: 7.5 V DC 200 mA via the BE1260 charger accessory Battery power: 1 x 1.5 V AAA alkaline or 1 x 1.2 V AAA NiMH rechargeable battery
Power consumption	Active: 220 mA, Idle position: 1 mA
Operating time	Alkaline battery ~ 2–3 weeks, NiMH battery ~ 1 week, fully charged
Activation	Via Visit transmitter
Radio frequency	315 MHz, 433.92 MHz or 868.3 MHz depending on region
Coverage	50 – 250m (55 – 273yd) depending on radio frequency. Coverage is reduced by walls, large objects and other radio transmitters.
Accessories	BE1260 Pager charger, BE1270 Bed shaker
In the box	BE1470 Pager, Belt clip, safety cord and an extra front label
Environment	For indoor use only.
Regulatory	Fulfil CE, FCC, RoHS, A-Tick, WEEE, Der Grüne punkt

Additional information

Operating temperature	0° – 35° C, 32° – 95° F
Transport and storage temp.	-10° – 50° C
Relative humidity	15% – 90% (non condensing)
Maintenance and cleaning	Maintenance free. Clean with a dry cloth. Don't use household cleaners, aerosol sprays, solvents, alcohol, ammonia, or abrasives.
Warranty and service	If the product appears to be damaged or doesn't function properly, follow the advice in this booklet. If it still doesn't function properly, contact your retailer for info about obtaining warranty service.

Care and cleaning



Please note: Failure to follow these care and cleaning instructions could result in damage to the pager and void the warranty.

Using connectors and jacks

Never force a connector into a jack. Check for obstructions on the jack. If the connector and jack don't join with reasonable ease, they probably don't match. Make sure that the connector matches the jack and that you have positioned the connector correctly in relation to the jack.

Using the pager

Operate the pager in a dry environment where the temperature is always between 0° and 35° C (32° and 95° F). If the pager gets wet, it should no longer be regarded as reliable and should therefore be replaced.

Cleaning

To clean the pager, use a soft, lint-free cloth. Avoid getting moisture in openings. Don't use window or household cleaners, aerosol sprays, solvents, alcohol, ammonia, or abrasives.

Service and warranty

If the pager appears to be damaged or doesn't function properly, follow the instructions in this user guide. If the pager still doesn't function as intended, contact your local dealer for information on service and warranty.

Additional information

For information about the proper disposal of the pager, and for other important safety and regulatory compliance information, see the section **Important safety instructions** on the following page.

Important safety instructions

This section contains important information about safety, handling, disposal, recycling and warranty.



Please note: Read all safety information and operating instructions below before using the pager.
Keep the user manual for future use.

Warning!

- Failure to follow these safety instructions could result in fire, electric shock, or other injury or damage to the product or other property.
- Do not use or store this pager near any heat sources such as naked flames, radiators, ovens or other devices that produce heat.
- Do not dismantle the pager; there is a risk of electric shock. Tampering with or dismantling the pager will void warranty.
- Be aware that alarms can be missed if the batteries run out.
- Only refer damaged or faulty pagers to qualified service personnel.
- The pager is intended to be used as part of a home alerting system but should not be used as the only security in life-threatening situations.
- The pager has no power switch. In order to disconnect the product, the battery must be removed.
- The pager is designed for indoor use only.
- Do not expose the pager to moisture.
- Protect the pager from shocks during storage and transport.

Model, type and classification

The information is available inside the pager's front lid.

Product disposal and recycling information



The symbol to the left means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The recycling of your product will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

Battery disposal information



This symbol indicates that the product contains batteries that according to local laws and regulations must be disposed of separately from household waste. Take used batteries to a collection point designated by local authorities.

The European Union - declaration of conformity



For use in all EU countries. Hereby, Bellman & Symfon AB, declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RED directive 2014/53/EU.

Support centers

If you have any questions, please contact the Bellman & Symfon support team.

European office *(English and Swedish)*

Bellman & Symfon Europe
Södra Långebergsgatan 30
436 32 Askim, Sweden
Call +46 31 68 28 20
E-mail info@bellman.com

German office

Bellman & Symfon Deutschland
Uelzener Str. 14
21335 Lüneburg
Call +49 800 7433338
E-mail info@bellman.de

Asia Pacific office

Bellman & Symfon Asia
1401-06 Main Tower GunagDong Intl. Building
339 Huanshi Dong Rd, Guangzhou China 510095
Call +86 20 8318 2950
E-mail info.cn@bellman.com

FCC compliance statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for uncontrolled equipment and meets FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines and RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment should be installed and operated with at least 20cm and more between the radiator and person's body (excluding extremities: hands, wrists, feet and ankles).

Industry Canada statement

Le fonctionnement de cet équipement est soumis aux conditions suivantes:

(1) l'équipement concerné ne doit pas causer d'interférences, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This Class B digital apparatus complies with the Canadian ICES-003.

DESIGN FOR EARS™



bellman.com

BEI1470_034MAN011