

WIDEX CHARGE n CLEAN



HAUPTMERKMALE

- Kompakt und tragbar; USB-Stecker ziehen, Abdeckung schließen und das Ladegerät in eine Tasche oder einen Beutel stecken.
- Kann durch mehreren Stromquellen betrieben werden.
- Intuitive Bedienung unterstützt durch Leuchtanzeigen, die den Ladezustand des Hörsystems anzeigen.
- Smartes Design mit einfach zu handhabendem Scharnierdeckel, um die Hörsysteme zu schützen.

BESCHREIBUNG

Das WIDEX mRIC CHARGE n CLEAN-Ladegerät ist zum Aufladen und Pflegen von zwei WIDEX MRR2D-Hörsystemen vorgesehen. Das Ladegerät verfügt über eine Ladeschale für jedes Hörsystem, ein Pflegefach (Trocknen und UV-C-Behandlung) für die Hörer, zwei Leuchtanzeigen (an den Seiten), die Auskunft über den Ladestatus des jeweiligen Hörsystems geben und eine zentrale Leuchtanzeige, die über den Status des Pflegezyklus informiert. Je nach Ladezustand der Hörsysteme kann jedes Hörsystem einzeln geladen werden. Wird etwa eines der Hörsysteme vollständig geladen in das Ladegerät gesteckt, so wird es nicht weiter aufgeladen. Ist das andere Hörsystem jedoch nicht vollständig aufgeladen, so wird es durch das Ladegerät aufgeladen. Während die Hörsysteme geladen werden, wird der Pflegevorgang (UV-C-Behandlung und Trocknen) durchgeführt. Der Pflegezyklus dauert 30 Minuten.

EIGENSCHAFTEN

Farbe:	Schwarz
Maße:	Höhe: 70 mm Breite: 83 mm Tiefe: 40 mm
Gewicht:	ca. 100 g
Kapazität:	Ein Hörsystem-Set kann in das Ladegerät eingelegt werden. Die Hörsysteme können einzeln geladen werden. Siehe Gebrauchsanweisung für Angaben zur Ladezeit des WIDEX mRIC CHARGE n CLEAN-Ladegeräts
UV-Licht:	UV-Desinfektion und Trocknung wird während des Ladevorgangs durchgeführt. Der Pflegezyklus dauert 30 Minuten.
Betriebstemperatur-, Feuchtigkeits- und Luftdruckbereiche:	0 °C (32 °F) bis 35 °C (95 °F), 20 % – 75 % rH
Lager- und Transportbedingungen:	-20 °C (-4 °F) bis 60 °C (140 °F), 5 % – 90 % rH

STROMVERSORGUNG

Eingang	Typ: DC, stabilisiert 5V +/- 5 % Anschluss: Micro-USB-Buchse Minimale Stromstärke: 900 mA Verschiedene Netzteile können verwendet werden (müssen kompatibel mit USB 2.0 sein) Power Bank: Kapazität: 10.000 mA/h – Anschluss: USB – Spannung: 5 V Das Hörsystem kann während des Aufladens warm werden.
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ENTSORGUNG

- Entsorgen Sie das Produkt (neu oder gebraucht) nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll.
- Das Produkt muss als elektronischer oder chemischer Abfall gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

Das Ladegerät auf einen Blick

Das Produkt besteht aus einer Ladeinheit für jedes Hörsystem, einem Aufbewahrungsfach für die Hörer und einer Leuchtanzeige mit drei Anzeigeleuchten, die den Ladestatus der Hörsysteme und den Status des Wartungszyklus anzeigen. Der Deckel wird mit einem Magneten verschlossen.

1. Micro-USB-Port
2. Ladeschale für das linke Hörsystem
3. Ladeschale für das rechte Hörsystem
4. Aufbewahrungsfach für die Hörer
5. Lade-Anzeigeleuchte des linken Hörsystems
6. Lade-Anzeigeleuchte des rechten Hörsystems
7. Anzeigeleuchte Pflegezyklus

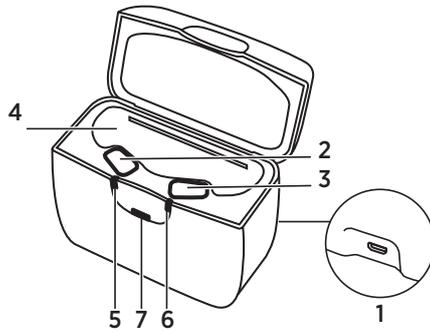

LIEFERUMFANG

In der Box ist Folgendes enthalten:

- Ein Ladegerät
- Ein USB-Kabel
- Ein Netzteil
- Eine Gebrauchsanweisung