



Driven by **Tempus**

MaxTM

Leben **leichter gemacht**

Die Anpassung von
Super Power-Geräten ist
jetzt super einfach

unitronTM Love the
experience

A Sonova brand

Ausgereifte Technologie für Super Power-Kunden

Menschen mit schwerem bis hochgradigem Hörverlust haben vielfältige Bedürfnisse und Präferenzen. Das bedeutet, dass die Anpassung von Hörsystemen für sie schwierig und frustrierend sein kann und oft mehrere Termine und Anpassungen nötig sind, bis das Gerät richtig sitzt.

**Zumindest
bis jetzt.**





Max™

Die Anpassung von Super Power-Hörsystemen ist mit Max™ (jetzt verfügbar auf der Tempus™-Plattform) super einfach.

Drei neue Super Power-Voreinstellungen machen es einfacher, die Erwartungen der Kunden zu erfüllen. Das bedeutet weniger Feineinstellungen und mehr Freude – schon ab der ersten Anpassung.

Nimmt man noch die unvergleichbare Personalisierung von FLEX™ hinzu, kann man leicht erkennen, warum sich das Anpassen von Max auf jeden Fall lohnt.

1 | Max SP Ein Super Power-HdO mit einer 13-er Batterie in einem strapazierfähigen Design. **2 | Max UP** Ein Ultra Power-HdO mit einer 675-er Batterie, die hält und hält.

Freude ab der ersten Anpassung

Erfüllen Sie die Erwartungen Ihrer Kunden von Beginn an mit einer von drei Super Power-Voreinstellungsoptionen. Mit einem einzigen Klick können Sie diese je nach den Vorlieben und Erfahrungen des Kunden festlegen.

Weniger Feineinstellungen von Beginn an können zu weniger und kürzeren Folgeterminen führen und zu mehr zufriedenen Kunden schon ab der ersten Anpassung.

Super Power-Voreinstellungen, die auf Kunden-Präferenzen abgestimmt sind



Traditionell

Für Kunden, die einen traditionellen Ansatz der Klangverarbeitung bevorzugen, mit wenig oder keiner Signalverarbeitung und ohne Direktionalität.



Konventionell

Für Kunden, die einen konventionellen Ansatz der Verstärkung suchen, mit moderater Signalverarbeitung und etwas Direktionalität.



Modern

Für Kunden, die den neuesten und besten Ansatz der Klangverarbeitung möchten, mit fortgeschrittener Signalverarbeitung und Direktionalität.

Und das sagen Hörakustiker über die Super Power-Voreinstellungen:

95 %

stimmen zu, dass sie zu einer höheren Kundenzufriedenheit führen*

91 %

denken, dass sie eine bessere Kundenakzeptanz bei der Erstanpassung bewirken*

87 %

sind der Meinung, dass durch sie weniger Feineinstellungen nötig sind*

50 %
präziser¹

36 %
schneller¹

Max ist nun auf unserer leistungsstarken Tempus-Plattform erhältlich, die speziell für Kunden mit schwerem bis hochgradigem Hörverlust optimiert wurde.

Die Stärke von Tempus liegt in unserer hochintelligenten SoundCore™-Technologie.

100 %
der Super Power-Kunden möchten in Gesprächen besser hören²


Tempus™

¹Im Vergleich zur North-Plattform bei der Spracherkennung und -lokalisierung

²2018 COSI Feldversuch-Daten

Die Tempus-Plattform, optimiert für Max

Mit SoundCore, einer Gruppe von vier intelligenten Funktionen, die Hörumgebungen schnell und automatisch analysieren und nahtlose Anpassungen vornehmen, können Kunden immer und überall aktiv an Gesprächen teilnehmen. Diese Funktionen wurden für Super Power perfektioniert und umfassen eine optimierte Sprachwahrnehmung und ein besseres Bewusstsein der Umgebung.

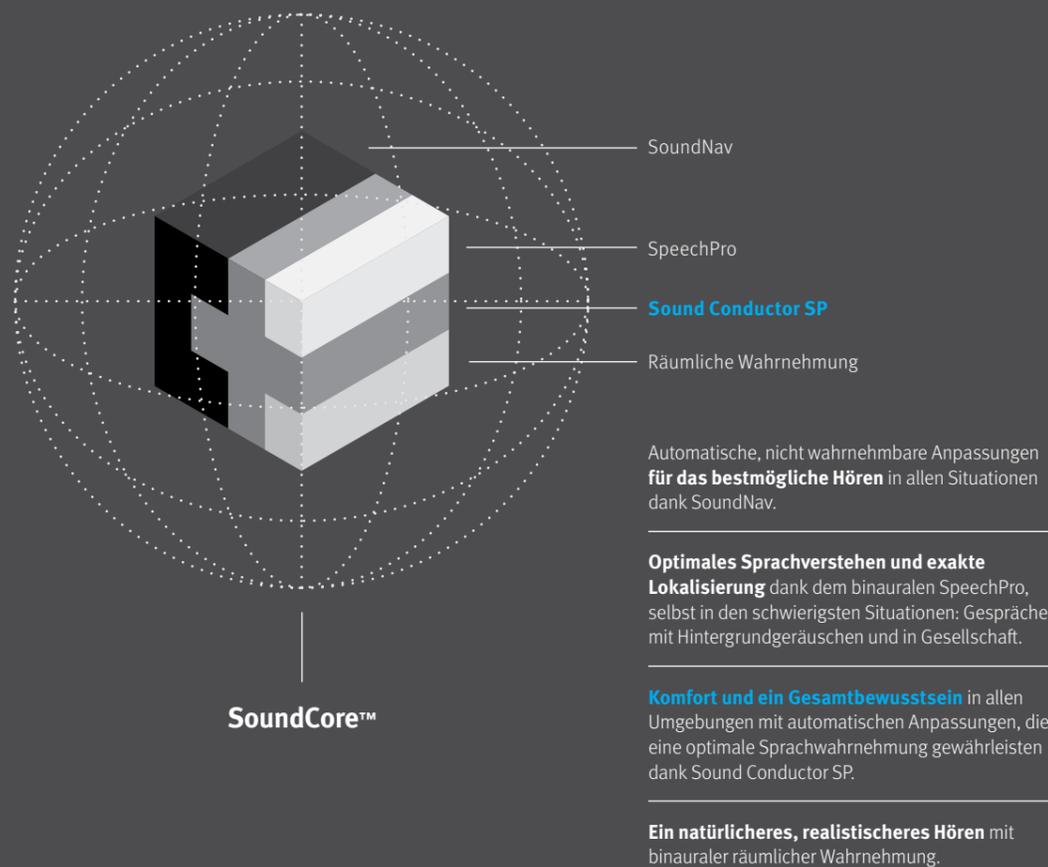

Technologie, die für eine Super Power-Leistung gemacht ist

Sound Conductor SP

Passt sich automatisch an, um eine optimale Sprachwahrnehmung zu gewährleisten und bietet gleichzeitig Komfort und ein Gesamtbewusstsein in allen Umgebungen. Optimiert für die vielfältigen Bedürfnisse von Super Power-Kunden mit schwerem bis hochgradigem Hörverlust, mit einem stärkeren Fokus auf Sprache, unter Beibehaltung eines realistischen Gleichgewichts von Sprache und Störgeräuschen.

Frequenzkompression 2

Nun mit der Fähigkeit, stets ein optimales Gleichgewicht von Klangqualität und Hörbarkeit zu liefern. Unabhängig vom Eingangssignal bietet diese Option Kunden ein besseres Bewusstsein und eine bessere Spracherkennung, indem sie hochfrequente Klänge in tiefere, besser hörbare Frequenzbereiche komprimiert. Die natürliche Klangqualität von Vokalen wird hierbei beibehalten.

Power Anpass Manager

Eine zuverlässige Lösung, um das Risiko von zu großer Verstärkung zu reduzieren. Diese Funktion erhöht die Akzeptanz der Erstanpassung für jene Kunden, die an zusätzliche Verstärkung gewöhnt sind, aber gerne auf einem sicheren Niveau hören möchten. Dies wird durch die Bereitstellung des Anfangspunkts gewährleistet, den sich die Kunden wünschen. Anschließend werden die Verstärkung und die Ausgabe allmählich und automatisch auf ein sicheres Niveau für ein optimales Sprachverständnis reduziert.

Ein absolut personalisiertes Erlebnis für Super Power-Kunden

Unser FLEX Ecosystem bietet personalisierte Lösungen für die akustischen Herausforderungen Ihrer Kunden. Dank dieser innovativen Lösungen können Sie sicherstellen, dass jeder Kunde Ihr Geschäft zufrieden und bestens unterstützt verlässt.



99 %


sagen, **FLEX:TRIAL** verbessere das Gesamterlebnis¹

87 %

der Kunden würden einen Versuch in Betracht ziehen²

85 %

der Kunden sagen, eine Upgrade-Funktion würde die Kaufentscheidung leichter machen²

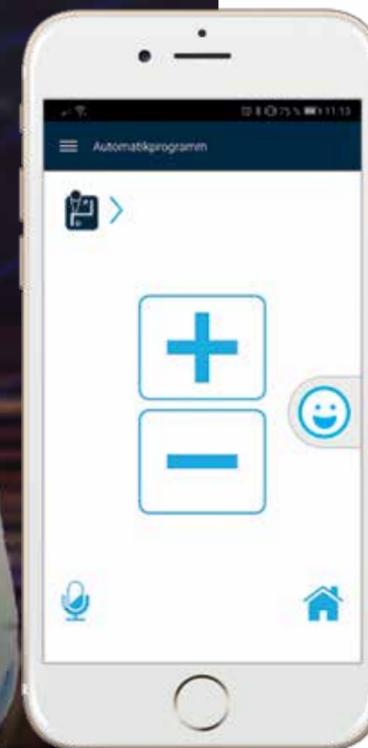

Helpen Sie ihnen, zuversichtliche Entscheidungen zu treffen

Kunden können Max Hörsysteme vor dem Kauf mit **FLEX:TRIAL™** zu Hause einfach ausprobieren. Und nach dem Kauf müssen sie sich keine Gedanken machen, denn sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Technologie-Ebene ihrer Hörsysteme mit **FLEX:UPGRADE™** durch ein Upgrade anzupassen.

Wir sind auf die spontanen Bewertungen Ihrer Kunden gespannt!

Max-Kunden können die **uControl™-App** auf ihr Smartphone³ herunterladen und die Leistung ihrer Hörsysteme immer und überall bewerten. Sie können sich die **Kundenbewertungen** mit der **TrueFit™**-Software von Unitron ansehen. Diese Bewertungen vermitteln Ihnen wertvolle Informationen, um die Bedürfnisse Ihrer Kunden besser zu verstehen.

Die passende Technologie für jeden Lebensstil

Herausfordernde Hörumgebungen können für Kunden mit schwerem bis hochgradigem Hörverlust besonders schwierig sein. **Log It All** hilft Hörakustikern und Kunden beim Verständnis dieser einzigartigen Hörumgebungen. Die Kombination der Kundenbewertungen und Log It All liefert Ihnen Fakten, die Ihre Empfehlung auf eine bestimmte Technologie-Ebene untermauern.



¹ Quelle: Anovum (2017) Unitron Launch Monitor

² Quelle: Consumer Research, Sonova Market Insights (2017)

³ Die uControl App für Max funktioniert für Smartphones von Apple mit iOS 7 und höher oder Android 4.0.3 und höher

Apple und das Apple-Logo sind Markenzeichen von Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern. Der App Store ist ein Serviceangebot von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc.



Ein farbenfrohes Leben leben



Prunkvolles Platin (P6)



Seidiger Sternenstaub (P7)



Lodernde Lava (P8)



Beige (O1)



Bernstein (P2)




Magisches Mahagoni (P4)

Max Anpassbereiche

Max

Gehäuse:	Max SP	Max UP
Ungefilterter Hörwinkel	137/75	139/82
Gefilterter Hörwinkel	132/68	133/75
Power Slim Tube	137/75	139/82

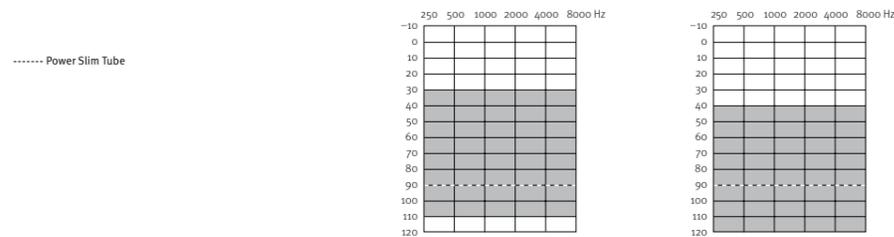

Zubehör hält Gespräche am Laufen



uStream

Dieser Streamer ermöglicht eine direkte Anbindung in Stereoqualität an Geräte, wie z. B. Mobiltelefone, Fernseher, Tablets sowie uMics. Besitzt außerdem alle Funktionen einer Fernbedienung.



uDirect™ 3

Mit diesem Streamer können Gespräche über Mobiltelefone, uMics und FM-Empfänger sowie Entertainment in Stereoqualität von Tablets, Fernsehern und Mobiltelefonen genossen werden. Besitzt zusätzlich alle Vorteile einer Fernbedienung.



Remote Control 2

Ermöglicht die diskrete Anpassung der Lautstärke und das Ändern von Programmen, auch unterwegs.



uTV™ 3

Fernsehen in Stereoqualität genießen durch die Übertragung der Klänge mittels eines Streamers vom TV auf beide Hörsysteme.



uMic™

Einen Gesprächspartner in schwierigen Hörumgebungen besser hören, indem er/sie ein uMic trägt. Seine/ihre Stimme wird dann über einen Streamer an die Hörsysteme übertragen.





Mehr Freude ab der ersten Anpassung mit Super Power-Voreinstellungsoptionen.

Lassen Sie Ihre Kunden Entscheidungen nach ihren Wünschen treffen – mit FLEX.

Bieten Sie personalisierte Lösungen, die Ihre Kunden sonst nirgendwo erhalten.

Max macht das Leben leichter

Verhelfen Sie ihnen dabei, wieder an Gesprächen teilnehmen zu können mit Hilfe der leistungsstarken Tempus-Plattform, die für Super Power-Kunden optimiert wurde.

Geben Sie Ihren Kunden mit einer Smartphone-App die Möglichkeit, ihre Empfindungen in jeder Situation leicht übermitteln zu können.

Max im Überblick

SoundCore		T Pro	T 800	T 700	T 600	T 500
SoundNav Das Automatikprogramm identifiziert und klassifiziert Signale in allen Umgebungen mit dem Schwerpunkt auf Gesprächssituationen.	Musik	•	•			
	Geräuschvolle Umgebung	•	•	•		
	Gespräch in großer Gruppe	•	•	•		
	Gespräch in kleiner Gruppe	•	•	•		
	Gespräch in ruhiger Umgebung	•	•	•	•	
	Gespräch im Störgeräusch	•	•	•	•	
	Ruhige Umgebung	•	•	•	•	
	Anzahl Umgebungen	7	7	6	3	AutoMic
SpeechPro Garantiert binaural optimales Sprachverstehen und exakte Lokalisierung, selbst in den schwierigsten Umgebungen.	SpeechPro	•	SpeechZone 2	SpeechZone		
	Speech Locator	•	•	•		
	Speech Focus	•				
	Dynamische räumliche Wahrnehmung	•				
Sound Conductor SP Die dynamische Balance der Funktionen sorgt für Sprachverstehen, Komfort und natürlichen Klang.	Sprachanhebung	•	•	•	•	•
	Störgeräuschunterdrückung	•	•	•	•	•
	Adaptive Direktionalität	Multiband	Multiband	Multiband	Multiband	•
Räumliche Wahrnehmung Macht es binaural einfacher, Signale zu lokalisieren und sorgt so für natürliches, realistisches Hören.	Räumliche Wahrnehmung	Dynamisch	Personalisiert	•		
	Pinna Effekt	•	•	•	•	•
Klangstabilisierung						
	AntiShock 2	•	•	•	•	•
	Windmanager	•	•	•	•	•
	Rückkopplungsmanager	•	•	•	•	•
	Natural Sound Balance	•	•	•	•	•
Erlebte Innovationen						
Insights	Log It All	•	•	•	•	•
	Kundenbewertungen	•	•	•	•	•
	Data Logging	•	•	•	•	•
FLEX	FLEX:TRIAL	•	•	•	•	•
	FLEX:UPGRADE		•	•	•	•
Komfort						
	DuoLink	•	•	•	•	•
	T-Spule und Easy-t	•	•	•	•	•
	Binaurales Telefon	•	•	•	•	•
	Einfacher Direkter Audio-Input* (DAI)	•	•	•	•	•
Anpassung						
	Automatischer Anpass Manager	•	•	•	•	•
	Power Anpass Manager (PAM)	•	•	•	•	•
	MyMusic	Autom. binaural synchronisiert	Autom. binaural synchronisiert	•	•	•
	Frequenzkompression 2	•	•	•	•	•
	Bassverstärker	•	•	•	•	•
	Tinnitus Masker	•	•	•	•	•
	IntelliVent	•	•	•	•	•
	Streaming Programme	•	•	•	•	•
	Manuelle Programme	•	•	•	•	•
	NAL-NL2/NL1 and DSLv5	•	•	•	•	•
	Super Power-Voreinstellungen	•	•	•	•	•
	Kanäle	20	20	16	10	6

Kompatibilität und Technologie variieren von Produkt zu Produkt

*Kompatibler direkter Audioeingang erforderlich

Wir bei Unitron sind davon überzeugt, dass sich Personen während des gesamten Hörerlebnisses wohlfühlen sollen. Unsere intelligenten Lösungen bieten einen Personalisierungsgrad, den sie sonst nirgendwo bekommen. Hierfür steht – Love the experience.

© 2019 Unitron. All rights reserved.