

Technische Übersicht.

Die Phonak Hörsysteme im Detail

Stand April 2025




Phonak Farbübersicht

	Gehäusefarben	Phonak Audéo I	Phonak Slim L-R	Phonak Audéo L	Phonak Audéo L-R Fit	Phonak Audéo P	Phonak Naida L	Phonak Naida P/M + Bolero M	Phonak Sky L	Phonak Terra+	Phonak Terra	Phonak Vitus+
Beige	H0										•	
Sand Beige	P1	•		•	•	•	•	•	•	•		•
Sandelholz	P3	•*		•		•	•	•	•	•	•	•
Kastanie	P4	•		•	•	•	•	•	•			
Champagner	P5	•		•		•	•	•	•			•
Silbergrau	P6	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Graphitgrau	P7	•		•		•	•	•	•			•
Samtschwarz	P8	•*		•		•	•	•	•			
Alpine White	T7							•				
Electric Green	Q2			•					•			
Carribean Pirate	Q3			•					•			
Precious Pink	T3			•					•			
Lava Red	M6								•			
Blue Ocean	M7								•			
Majesty Purple	M8								•			
Silber/Schwarz	2A		•									
Graphit/Schwarz	3A		•									
Kupfer/Schwarz	4A		•									
Sandelholz/Schwarz	6A		•									
Kupfer	1A	•*										
Sienna Red	8A	•*										
Atlantic Green	9A	•*										

	Hörwinkelfarben	Phonak Sky L/M
Grün	R1	•
Gelb	R2	•
Pink	R3	•
Orange	R4	•
Blau	Q6	•
Violett	Q7	•
Transparent	13	•

Faceplate Farben

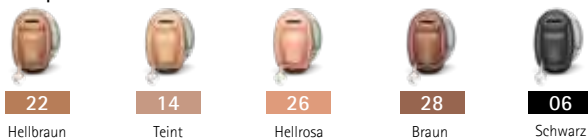


Schalen Farben



* Coming Soon

Faceplate Farben Titanium

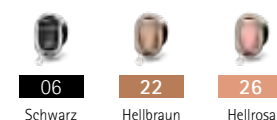

Schalen Farbe Titanium



Im-Ohr Hörsysteme
online konfigurieren
und bestellen:
www.phonak.de/ido

Phonak Gehäuse und Optionen

	Phonak Audéo™ I		Phonak Naída™ L		
Modell	R	Sphere	PR	SP	UP
Batterietyp	Akku	Akku	Akku	13	675
Multifunktionstaster	•	•	•	•	•
Direkte Konnektivität	•	•	•	•	•
Telefonspule				•	•
Roger	•	•	•	•	•
CROS I/L Kompatibilität	•		•		
Max. Verstärkung (dB) und Max. Ausgangsschalldruck (dB SPL) 2 cm³ Kuppler	S Receiver		HE11 680	HE11 680	HE11 680
	47 / 112		68 / 130	75 / 133	78 / 134
	M Receiver		SlimTube 4.0	HE11	HE11
	51 / 114		69 / 129	81 / 139	84 / 141
	MAV Receiver				
	50 / 119				
	P Receiver				
	59 / 122				
	UP Receiver				
	71 / 132				

	Phonak Slim™ L	Phonak Audéo™ L				Phonak Audéo™ L
Modell	Slim	R	RT	RL (Life)	312	Fit
Batterietyp	Akku	Akku	Akku	Akku	312	Akku
Multifunktionstaster	•	•	•	•	•	•
Direkte Konnektivität	•	•	•	•	•	•
Telefonspule			•			
Roger	•	•	•	•	•	•
CROS L Kompatibilität		•	•			
Max. Verstärkung (dB) und Max. Ausgangsschalldruck (dB SPL) 2 cm³ Kuppler	S Receiver	S Receiver				–
	47 / 111	47 / 111				–
	M Receiver	M Receiver				Sensor Receiver (M)
	51 / 114	51 / 114				51 / 114
	MAV Receiver	MAV Receiver			–	–
	50 / 119	50 / 119			–	–
	P Receiver	P Receiver				Sensor Receiver (P) ¹
	59 / 122	59 / 122				59 / 122
	–	UP Receiver				–
	–	71 / 132				–

	Phonak Virto™ I	
Modell	Titanium	10 NW O
Batterietyp	10	10
Max. Verstärkung (dB) und Max. Ausgangsschalldruck (dB SPL) 2 cm³ Kuppler	M (40/109) P (50/115) SP (60/119)	M (40/109) P (50/115) SP (60/119)
Mikrofon-Technologie	Omni	Omni
Direkte Konnektivität		
Roger	Roger NeckLoop ²	Roger NeckLoop ²
Telefonspule	Optional	Optional
Bedienelemente: Taster Lautstärksteller	Auf Batteriefach Nein	Auf Batteriefach Nein

¹ nur für Sensor cShell erhältlich

² Telefonspule erforderlich

Phonak Gehäuse und Optionen

	Phonak Terra™+ / Terra™					Phonak Sky™ L			
Modell	RIC-R	RIC-312	BTE-M	BTE-SP	BTE-UP	M	PR	SP	UP
Batterietyp	Akku	312	312	13	675	312	Akku	13	675
Multifunktionstaster	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Telefonspule			•	•	•	•		•	•
Roger			Roger NeckLoop	Roger NeckLoop	Roger NeckLoop	•	•	•	•
CROS L Kompatibilität							•		
Direkte Konnektivität	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Max. Verstärkung (dB) und Max. Ausgangsschalldruck (dB SPL) 2 cm³ Kuppler	S Receiver		HE11 680	HE 11 680	HE11 680	HE11 680	HE11 680	HE11 680	HE11 680
	47 / 111		63 / 128	75 / 133	78 / 134	63 / 128	68 / 130	75 / 133	78 / 134
	M Receiver		SlimTube 4.0	HE11	HE11	SlimTube 4.0	SlimTube 4.0	HE11	HE11
	51 / 114		58 / 122	81 / 139	84 / 141	58 / 122	69 / 129	81 / 139	84 / 141
	P Receiver								
	69 / 120								
	UP Receiver								
	71 / 132								

Phonak Charger – Kompatibilitätsübersicht

Phonak ChargerGo RICSPH I	Phonak ChargerGo RIC I	Phonak Charger RIC I	Phonak Charger Ease	Phonak Slim Charger	Phonak Charger Case Go™	Phonak Life Charger™	Phonak Charger Combi BTE 2*
							
075-0057-12	075-0055-12	075-0054-12	075-0080-10	075-3024-12	075-3017-12	075-3023-12	075-0065-12

Audéo I-Sphere	•							
Audéo I-R		•	•					
CROS I-R		•	•					
Terra+ RIC-R				•				
Audéo L-R/RT				•				
Audéo L-RL					•	•		
Audéo L-R Fit				•				
CROS L-R				•				
Naída L-PR							•	
Sky L-PR							•	
Slim L-R					•			
Roger Focus II							•	

* Die gleiche Kompatibilität gilt für Phonak Charger Combi BTE (075-0062-XX)

Die Charger-Kompatibilität älterer Geräte finden Sie hier: www.phonak.de/charger

Phonak Produktportfolio

RIC (Ex-Hörer)				
90 Premium				
	Phonak Audéo I90		Phonak Slim L90	Phonak Audéo L90
Infinio	 R  Sphere	Lumity	 Slim	 R Fit  312
70 Advanced				
	Phonak Audéo I70		Phonak Slim L70	Phonak Audéo L70
Infinio	 R  Sphere	Lumity	 Slim	 R Fit  312
50 Standard				
	Phonak Audéo I50		Phonak Slim L50	Phonak Audéo L50
Infinio	 R	Lumity	 Slim	 R  RT  RL  312
30 Essential				
	Phonak Audéo I30		Phonak Slim L30	Phonak Audéo L30
Infinio	 R	Lumity	 Slim	 R  RT  RL  312
Low Essential				
			Phonak Terra+	Phonak Audéo P30
			 R  R  RT  312  13T	
Lower Essential				
	Phonak Terra+			
Basic				
	Phonak Terra			
				 312



312



312

Im-Ohr	
90 Premium	
Phonak Virto I90	
Infinio	 Titanium  10 NW O
70 Advanced	
Phonak Virto I70	
Infinio	 Titanium  10 NW O
50 Standard	
Phonak Virto I50	
Infinio	 10 NW O
30 Essential	
Phonak Virto I30	
Infinio	 10 NW O
Low Essential	
Phonak Virto P30	
	 10 NW O  312 NW O  312
Lower Essential	
Phonak Terra+	
Basic	
Phonak Terra	

HdO			
90 Premium			
Phonak Naída L90			
Lumity			
	PR	SP	UP
70 Advanced			
Phonak Naída L70			
Lumity			
	PR	SP	UP
50 Standard			
Phonak Naída L50			
Lumity			
	PR	SP	UP
30 Essential			
Phonak Naída L30			
Lumity			
	PR	SP	UP
Low Essential			

Lower Essential			
Phonak Terra+			
			
	M	SP	UP
Basic			
Phonak Terra			
			
	M	SP	UP

Kinder			
90 Premium			
Phonak Sky L90			
Lumity			
	M	PR	SP
			UP
70 Advanced			
Phonak Sky L70			
Lumity			
	M	PR	SP
			UP
50 Standard			
Phonak Sky L50			
Lumity			
	M	PR	SP
			UP
30 Essential			
Phonak Sky L30			
Lumity			
	M	PR	SP
			UP

R Rechargeable (Akku)
 Fit..... Fitnesstracker (Akku)
 312..... 312er Batterie
 312 NW O..... non-wireless Omni (312er Batterie)
 10 NW O..... non-wireless Omni (10er Batterie)
 Titanium..... 10er Batterie
 M..... 312er Batterie
 PR..... Power Rechargeable (Akku)
 SP..... Super Power (13er Batterie)
 UP..... Ultra Power (675er Batterie)

Alle verfügbaren Geräte inkl. weiterhin verfügbarer
 Vorgängermodelle finden Sie in unserer Preisliste
 und im Phonak Store.

Funktions- und Programmübersicht Infinio

Programme		190	170	150	130
AutoSense OS 6.0	Automatische Programme				
	 Ruhige Umgebung	•	•	•	•
	 Verstehen im Störgeräusch	•	•	•	•
	 Komfort im Störgeräusch	•	•	•	
	 Musik	•	•		
	 Verstehen bei Fahrgeräuschen	•	•	•	
	 Spheric Speech im lauten Störgeräusch ¹	•	•		
	 Verstehen im lauten Störgeräusch ⁴ 	•			
Manuelle Programme	 Sprach-Streaming (Medien) und Audio-Streaming (Medien) ⁴	•	•	•	•
	 Spheric Speech im lauten Störgeräusch ¹	•	•		
	 Verstehen im lauten Störgeräusch ⁴ – Mehr Sprachverstehen durch enge Fokussierung nach vorne, manuelle Aktivierung 	•	•		
	 Speech in 360° ⁴ – Ansprechbarkeit, auch von der Seite oder von hinten, automatische Fokussierung 	•	•		
Funktionen		190	170	150	130
SmartSpeech Technologie	 Spheric Speech Clarity ¹	•	•		
	 SpeechSensor ⁴ – Mehr Sprachverstehen von der Seite und von hinten durch ständiges Screenen der Hörumgebung	•	• ¹		
	 Speech Enhancer Optimiert leise Sprache in ruhigen Umgebungen	•			
	 StereoZoom 2.0 ⁴  Mehr Sprachverstehen durch enge Fokussierung nach vorne	•	•		
	 Dynamic Noise Cancellation ⁴ Unterdrückung räumlicher Störgeräusche, Einstellbar über myPhonak App	•	•		
	 Motion Sensor Hearing ^{2/4} Ermöglicht in Bewegung eine bessere Wahrnehmung der Umgebung	•	•	•	
	 RogerDirect ⁴	•	•	•	•
	 UltraZoom ⁴ Adaptive Richtmikrofontechnologie	•	•	•	•
	 DuoPhone ⁴ – Binaurales Telefonieren durch Übertragung des Audiosignals auf das andere Hörsystem, automatische Aktivierung 	•	•	•	
	 WindBlock Reduzierung von Windgeräuschen	•	•	•	•
	 SoundRelax Reduzierung von Impulsgeräuschen	•	•	•	• ⁵
	 Real Ear Sound ⁵ Wiederherstellung des räumlichen Höreindrucks	•	•	•	•
	 QuickSync ⁴ Abgleich von Programmwahl und Lautstärkeinstellung	•	•	•	•
	 SoundRecover2 Mehr Sprachverständlichkeit und Hörbarkeit durch Frequenzkompression	•	•	•	•
	 WhistleBlock Eliminiert Rückkopplungen	•	•	•	•
	 NoiseBlock Reduzierung von störenden Nebengeräuschen	•	•	•	•
	 auto Akklimatisierung  Tinnitus Balance Noiser  Gesundheitsfunktionen ^{3/5}	•	•	•	•
	 Direkte Konnektivität ⁴ Ankopplung von Telefon, Fernseher und anderen Audioquellen	•	•	•	•
	 Tap Control ^{2/4} Steuerung von Funktionen per Doppeltipp auf Ohrmuschel	•	•		
Anzahl der Kanäle		20	20	16	12

Funktions- und Programmübersicht Lumity und Terra (+)

Programme			L90	L70	L50	L30	Terra+	Terra
AutoSense OS 5.0	Automatische Programme	Ruhige Umgebung	•	•	•	•	•	•
		Verstehen im Störgeräusch	•	•	•	•	•	•
		Komfort im Störgeräusch	•	•	•			
		Musik	•	•				
		Komfort in halligen Situationen	•					
		Verstehen bei Fahrgeräuschen	•					
		Verstehen im lauten Störgeräusch	•					
		Sprach-Streaming (Medien) und Audio-Streaming (Medien)	•	•	•	•	•	• ³
Manuelle Programme	Verstehen im lauten Störgeräusch – Mehr Sprachverstehen durch enge Fokussierung nach vorne, manuelle Aktivierung	•	•					
	Speech in 360° – Ansprechbarkeit, auch von der Seite oder von hinten, automatische und manuelle Fokussierung	•	•					
Funktionen			L90	L70	L50	L30	Terra+	Terra
SmartSpeech Technologie	SpeechSensor – Mehr Sprachverstehen von der Seite und von hinten durch ständiges Screenen der Hörumgebung	•						
	Speech Enhancer Optimiert leise Sprache in ruhigen Umgebungen	•						
	StereoZoom 2.0 Mehr Sprachverstehen durch enge Fokussierung nach vorne	•	•					
	Dynamic Noise Cancellation Unterdrückung räumlicher Störgeräusche, Einstellbar über myPhonak App	•	•					
	Motion Sensor Hearing¹ Ermöglicht in Bewegung eine bessere Wahrnehmung der Umgebung	•	•	•				
	RogerDirect	•	•	•	•			
	UltraZoom Adaptive Richtmikrofontechnologie	•	•	•	•	•	•	
	DuoPhone – Binaurales Telefonieren durch Übertragung des Audiosignals auf das andere Hörsystem, automatische Aktivierung	•	•	•				
	EchoBlock Reduzierung von Echo- und Nachhallgeräuschen	•						
	WindBlock Reduzierung von Windgeräuschen	•	•	•	•			
	SoundRelax Reduzierung von Impulsgeräuschen	•	•					
	Real Ear Sound Wiederherstellung des räumlichen Höreindrucks	•	•	•				
	QuickSync Abgleich von Programmwahl und Lautstärkeeinstellung	•	•	•	•	•	•	
	SoundRecover2 Mehr Sprachverständlichkeit und Hörbarkeit durch Frequenzkompression	•	•	•	•	•	• ⁵	
	WhistleBlock Eliminiert Rückkopplungen	•	•	•	•	•	•	
	NoiseBlock Reduzierung von störenden Nebengeräuschen	•	•	•	•	•	•	
	auto Akklimatisierung Tinnitus Balance Noiser Gesundheitsfunktionen²	•	•	•	•	• ⁴	• ⁴	
	Direkte Konnektivität Ankopplung von Telefon, Fernseher und anderen Audioquellen	•	•	•	•	•	• ⁶	
	Tap Control² Steuerung von Funktionen per Doppeltipp auf Ohrmuschel	•	•					
	Anzahl der Kanäle			20	20	16	12	10

Binaurale VoiceStream Technologie

¹ Nur für wiederaufladbare Modelle verfügbar

² nicht für Naída L-UP, Sky L verfügbar

³ nur Sprach-Streaming (Medien)

⁴ nur auto Akklimatisierung

⁵ SoundRecover

⁶ Terra nicht mit Phonak Wireless Communication Portfolio kompatibel